




neodisher® MediKlar special



Makinalarda ısıya dayanıklı ve dayanıklı olmayan aletlerin temizliğinde durulama desteği

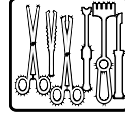

Konsanre sıvı

Uygulama alanları:

- Oftalmolojik aletler dahil tüm cerrahi aletler, anestezi ekipmanları, konteynırlar, implantlar ve biberonların makinalarda temizliğinde durulanması
- Karyola üreticilerinin talimatlarına göre uygun olan karyolaların makinalarda temizliğinde durulanması

Performans:

- Islanması zor olan plastik yüzeylerin mükemmel ıslatılması
- Yıkama ürünlerin hızlı ve lekesiz kuruması
- neodisher MediKlar special amaçlandığı şekilde kullanıldığında, tıbbi cihazların biyoyumluluğu etkilenmez. (Tıbbi biyolojik değerlendirme EN ISO 10993-1'e göre cihazlar)
- Larengeal maskeler, valfler, adaptörler gibi polisülfon (PSU) ve polifenilsülfon'dan (PPSU) üretilmiş anestezi ekipmanlarının aksesuarlar ve konteynır kapaklarının parçalarında durulama aşamasında üretimden kaynaklanan gerilim çatlakları oluşabilir. Bunların uygunluğu öncelikle test edilmelidir.

Özgün özellikler:

- Kuruma süresini önemli ölçüde azaltır
- Taşınan alkali artıkları nötralize eder
- Son durulamada yumuşatılmış su kullanıldığında lekelenmeyi azaltır

Uygulama ve dozaj:

neodisher MediKlar special yıkama makinalarında ve dekontaminasyon sisteminde kullanılır.

Dozaj başka şeylerin yanı sıra ilgili uygulama alanındaki yıkama türüne ve su kalitesine bağlıdır. neodisher MediKlar special kullanılırken aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır:

- Cerrahi aletlerin, anestezi ekipmanlarının, konteynırların, implantların ve biberonların durulanması için: 0,2 - 0,4 ml/lt
- Karyolaların durulanması için: 0,2 - 0,8 ml/lt

Yıkama makinaları, dekontaminasyon sistemleri ve dozlama sistemleri neodisher MediKlar special kullanımına uygun olmalıdır.

Notlar:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.
- Ürün değişiminden önce emme hortumu dahil dozlama sistemini su ile durulayın.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide olarak yapılmalıdır.
- Lütfen yeniden işleme için DIN EN ISO 17664'e, karyola üreticilerinin yeniden işlemeye göre tavsiyelerine ve güncel AK-BWA otomatik dekontaminasyon broşüründeki Alman karyolalar ve trolley'ler çalışma grubunun tavsiyelerine uyun.
- Yıkama makinası üreticilerinin verdikleri tavsiyeler dikkate alınmalıdır.



neodisher® MediKlar special

Teknik veriler

pH-değeri	4,0 - 3,5 (0,2 - 0,8 ml/l, deiyonize suda, 20°C)
Viskozite	< 50 mPa s (konsantre, 20°C)
Yoğunluk	yaklaşık 1,05 gr/cm ³ (20°C)

İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:

% < 5 fosfonat, %15 - 30 iyonik olmayan sürfaktanlar, koruyucular (metilkloroizotiazolinon/ metilizotiazolinon)

CE-işareti

neodisher MediKlar special medikal ürünlerle ilgili Avrupa direktifine uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

Depolama bilgisi:

Daima 0°C - 30°C aralığında depolayın. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 3 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.

Tehlike ve ihtiyati durumlar:

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın. Bu form www.drweigert.com adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

MB 4073/3-2
Yayın tarihi: 07/2020

Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.