




# neodisher® PreStop



## Cerrahi aletler için korozyon önleyici

### Sprey köpük

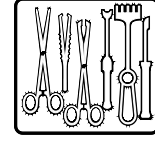

#### Uygulama alanları:

- Cerrahi aletlerin ameliyathanede kullanımından sonra korozyon önlemek için sprej

#### Performans:

- Korozyon önleyici: Cerrahi aletlerin üzerinde kalan kan ve fizyolojik salin solüsyonunun neden olabileceği oyuk korozyonunu önler
- Ameliyathanede etkili ön temizleme
- Laparoskopik aletler dahil cerrahi aletler için uygundur.
- Anodize alüminyumun uygunluğu önceden test edilmelidir.

#### Özgün özellikler:

- Cerrahi aletleri ıslak tutarak atıkların kurumasını önler
- Sonraki temizliği kolaylaştırır
- Temas süresi boyunca aletlerin üzerinde mikroorganizmaların büyümesini önler (bakteriyostatik)

#### Uygulama ve dozaj:

neodisher PreStop kullanımdan sonra cerrahi aletlerin üzerine tam bir ıslanma sağlamak için direkt olarak sıkılır. Aletlerin bulunduğu kap uygulama sonrasında kapalı olarak tutulmalıdır. neodisher PreStop uygulanmış aletler 72 saate kadar bekleyebilir. Sonrasındaki temizlik öncesinde dikkatlice durulanmalıdır.

#### Genel kullanım talimatları:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- Prestop'u uygulamak için birlikte gelen püskürtme çubuğunu kullanın.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.

- neodisher PreStop tercihen deiyonize su ile durulanmalıdır.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.
- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyarak yeniden işleme dikkat edin.

#### Teknik veriler:

pH-aralığı	9,5 (seyreltilmemiş 20°C)
Yoğunluk	Yaklaşık 1,0 gr/cm <sup>3</sup> (20 °C)

#### İçeriği:

% < 5 anyonik ve amfoterik sürfaktanlar  
enzimler, koruyucular (3-Iodo-2-propinil  
butilkarbamat, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one)

#### CE-işareti:

neodisher PreStop tıbbi cihazlar için Avrupa standartlarına uygundur. Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

#### Depolama bilgisi:

Daima 0°C - 25°C aralığında depolayın. Kapağını kapalı tutun. Güneş ışığından koruyun. Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 2 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır.

#### Tehlike ve ihtiyati durumlar:

neodisher PreStop (CLP-Düzenleme EC) No 1272/2008'e göre tehlikeli değildir. Bidonu sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.



# neodisher® PreStop

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Bu form [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) adresindeki "Service/Downloads" bölümündedir.

MB 4086/2-4 Yayın Tarihi: 05/2020



Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz